



ZELOSTAT®

ZELOSTAT Needle

ゼロスタット



眼科用針



取扱いサイズ

製品コード	サイズ	入り数
NO-31S-09-100	31G x 9mm	100
NO-31S-13-100	31G x 13mm	
NO-34S-09-100	34G x 9mm	



プラスチックパッケージ



ルアーロックシリンジ専用


販売名: ZELOSTAT Needle 眼科用針
医療機器認証番号: 306AABZX00048000
γ線滅菌済み

ASTI
ASTI株式会社

made in japan

薬液の無駄を最小限に


ローデッドスペースの針基

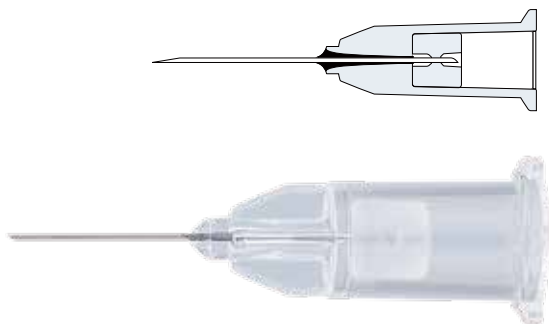

デッドスペースを最小限にするために特別に設計された針基です。

残液量の比較

※シリンジ内残液含む

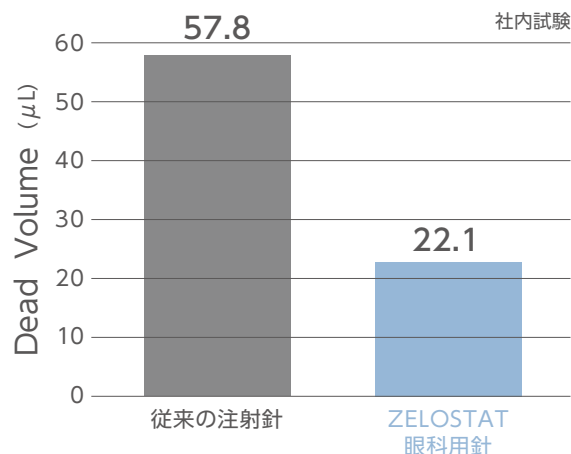


*代表値であり、保証値ではありません。

注入をスムーズに

広い針管内径

1ゲージ太い針と同等レベルの内径があり、より低侵襲な注射を可能とします。

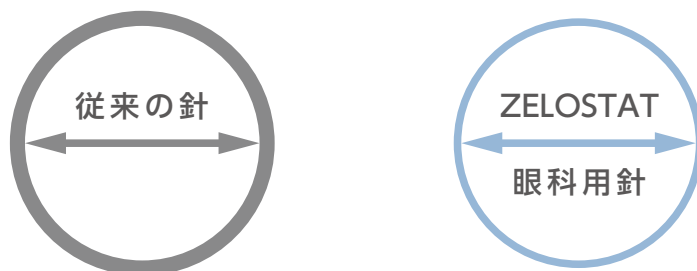

ゲージ	外径 (mm)	内径 (mm)
31 G	0.25	0.20
34 G	0.18	0.12

一般的な30Gの針の場合：外径0.30mm、内径0.20mm程度

* ISO9626 公称値

お問合せ先

ASTI



製品情報はこちら

製造販売業者：ASTI株式会社
〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田1-5-1
TEL:053-428-5644
Email:medical@asti.co.jp